

자동연속 주사기

Automatic Syringes & Instruments



Your Quality Choice

0.5cc 타마 220 고정용량 주사기

금속 재질로 구성된 자동 연속 주사기

- 가금용 / 소동물용
- 금속 실린더에서 피스톤이 부드럽게 작동
- 각기 다른 피스톤으로 주사 용량을 결정
- 0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc

유리관이 없어서
깨질 염려 없음



타마 220은 가금 산업 업계 최초로 고정 용량 방식으로 개발 되어, 사용하기 쉽고, 가격이 저렴한 연속 주사기입니다.

0.5cc 타마 205

용량 조절 자동 연속 주사기

- 가금용 / 소동물용
- 용량 조절 범위 : 0.1~0.5cc



1cc 타마 210

전형적인 용량 조절 자동 연속 주사기

- 가금용 / 소동물용
- 용량 조절 범위 : 0.1~1.0cc



2cc 타마 240

전형적인 용량 조절 자동 연속 주사기

- 가금용 / 소동물용
- 용량 조절 범위 : 0.1~2.0cc



쌍침 자동 연속 계두 접종기

자동 연속 계두 접종기의 신형 모델

- 쌍침 자동 연속 계두 접종기는 쌍침으로 구성되어 있으며, 한방에 원하는 계두 접종을 연속적으로 수행할 수 있습니다.
- 신속하고 효과적인 백신 접종
- 5cc 용량



단침 자동 연속 계두 접종기

단순하고 편리하게 개발된 신형 모델

- 단침 자동 연속 계두 접종기는 구형 방식의 불편한 계두 접종 작업을 단순하고 편리하게 할 수 있도록 개발되었습니다.
- 계두 주사침으로 인해 손이 다칠 염려가 없음
- 백신의 허실이 없음
- 1마리씩 정확한 용량을 접종



1cc 타마 320

금속 재질로 구성된 자동 연속 주사기

- 아주 작은 용량의 백신 접종도 가능한 주사기이며, 금속 재질로 된 주사기와 피스톤을 통해 용량을 조절할 수가 있습니다.
- 용량 조절 범위 : 0.1~1.0cc

유리관이 없어서
깨질 염려 없음



동물용 의료기기 허가 번호 제67-1, 2, 3, 4, 5호

2cc 타마 213 / 5cc 타마 215A

양돈용 자동 연속 주사기

백신 접종, 약물 주사 등 여러 용도로 사용이 가능한 자동 연속 주사기입니다. 약병 고정 장치(Vial holder)를 이용하여 백신이나 동물 약품을 주사기에 고정시켜 쉽게 주사할 수 있으며, 약물통 주입 장치(Feeding bottle) 이용하여 약물을 통해 채워 주사할 수도 있습니다.(사진 참조) 약물 수송 호스를 연결(Tube adaptor)하여 사용할 수도 있습니다.(선택 사항)

2cc 타마 213

- 양돈용, 중소 가축용
- 용량 조절 범위 : 0.1~2.0cc



5cc 타마 215A

- 양돈용, 중소대 가축용
- 용량 조절 범위 : 0.1~5.0cc



최신형 Vial Holder 장치!

5cc 타마 215

대가축용 전형적인 자동 연속 주사기

- 대가축용(소, 말 등)
- 소 및 대가축의 자동 연속 백신 접종 등을 하기 위해 사용
- 용량 조절 범위 : 0.1~5.0cc



타마 214 양돈용 / 고정용량 주사기

쌍관총 자동 연속 주사기

- 약병 고정 장치(Vial Holder)
- 약물 주입 장치(Feeding Bottle) 사용 가능(사진 참조)
- 두 종류의 백신이나 약물을 각각의 용량으로 주사 가능
- 두개의 주사부위를 한 군데로 주사할 수 있음
- 1.0cc, 1.5cc, 2.0cc




여러 종류의 백신을
한방의 주사로!

타마 216 양돈용 / 고정용량 주사기

쌍관총 자동 연속 주사기

- 약물 호스와 투관침을 통해 백신이나 약병으로 연결
- 두 종류의 백신이나 약물을 각각의 용량으로 주사 가능
- 두개의 주사부위를 한 군데로 주사할 수 있음
- 1.0cc, 1.5cc, 2.0cc

여러 종류의 백신을
한방의 주사로!

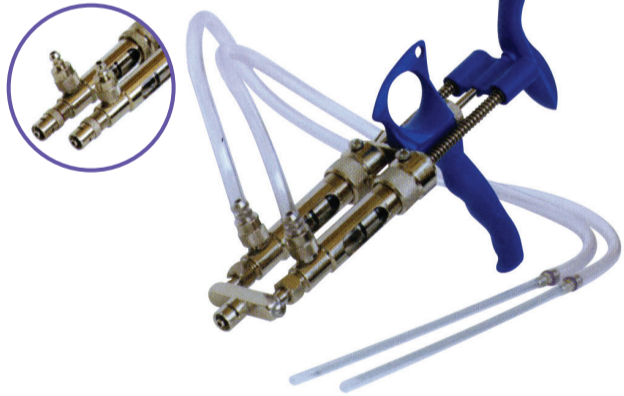

타마 222 가금용 / 고정용량 주사기

쌍관총 자동 연속 주사기

- 독특한 방식의 고정 용량 주사기
- 양쪽 각각에서 5가지 종류의 용량을 선택
- 두개의 주사부위를 한 군데로 주사할 수 있음
- 0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc

여러 종류의 백신을
한방의 주사로!


유리관이 없어서
깨질 염려 없음



동물용 주사침

- 피하 주사용 : 철제 주사침
- 1박스에 12개(1다스)
- 1회용 : 폴리재질
- 1박스에 100개

모든 사이즈 구매 가능!

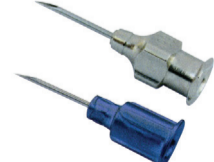

스틱 인젝터(Stick Injector)



자동 연속 주사기에 연결하여 먼 거리에서도 중소 가축이나, 대가축을 효율적으로 주사할 때 사용되는 보조 기구입니다.

■ 제조원 E. Nechmed Ltd. Israel

■ 한국총판 및 기술 지원



대전시 유성구 대학로 203번길 13
Tel.042-822-6763 Fax.042-822-6766
www.dasrim.com